


Visit babyvakt



BE1491

Knappar och anslutningar

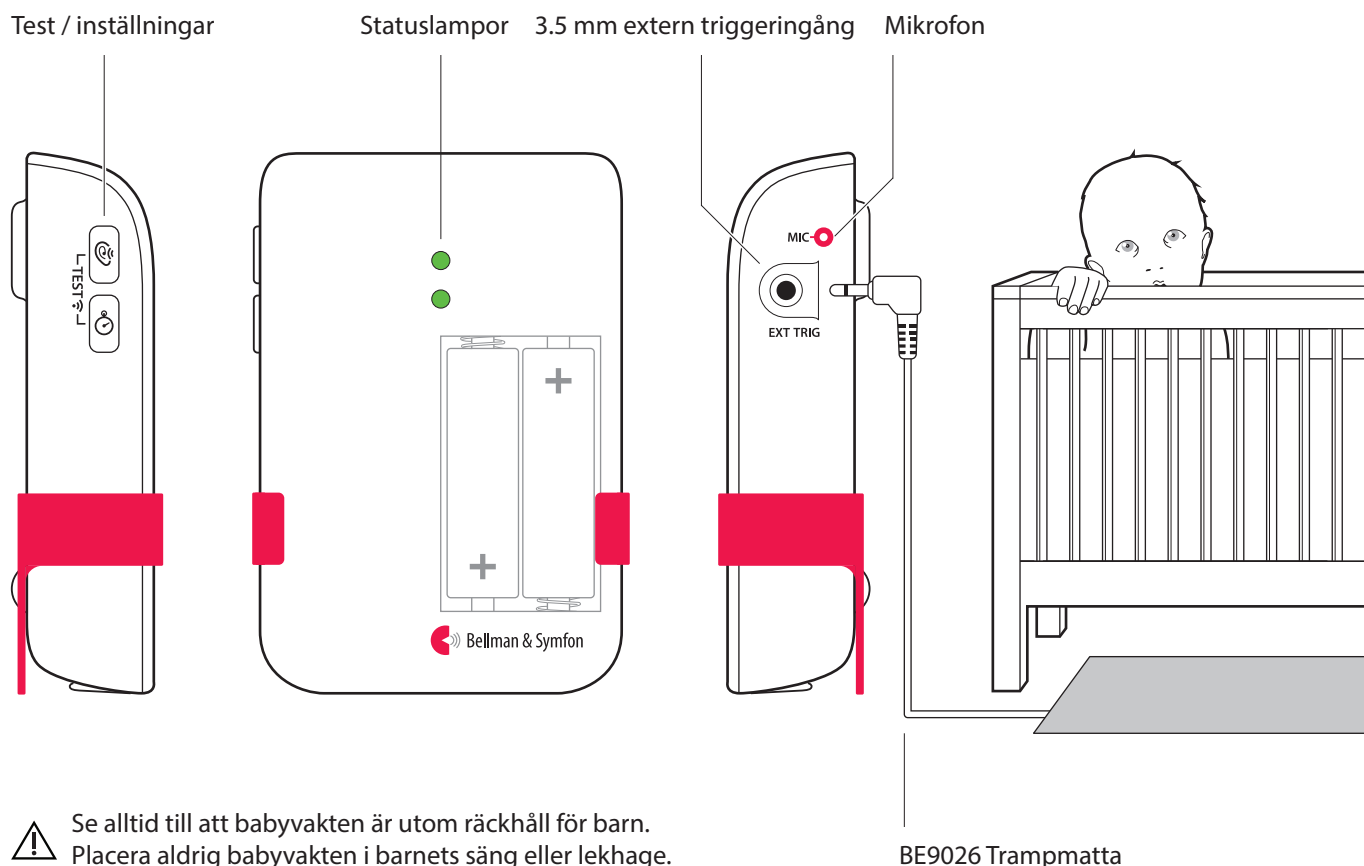

Se alltid till att babyvakten är utom räckhåll för barn.
Placera aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhage.

Teknisk information

I förpackningen

- BE1491 Visit babyvakt
- 2 × 1,5 V AA alkaliska batterier
- Förmonterat bordsställ
- Skruv och plugg

Ström och batteri

- Batterityp
2 × 1,5 V AA litium eller alkaliska batterier
- Strömförbrukning
Aktiv < 70 mA
Viloläge < 400 µA
- Driftstid
Alkaliska batterier ~ 6 mån
Litiumbatterier ~ 1 år

Storlek och vikt

- 100 × 65 mm × 27 mm
- Vikt: 118 g med batterier

Aktivering

- Via mikrofonen och testknapparna
- Via en trampmatta (tillbehör)

Inställningar

- Känslighet: 65 dB, 75 dB, 85 dB
- Fördröjning : 30 s, 10 s, 1 s

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868,30 MHz
- Räckvidd : 50 - 250 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning

Anpassningar

babyvakten kan användas med följande Visitmottagare och originaltillbehör:

Visitmottagare

- BE1450 Visit portabel mottagare
- BE1441 Visit blyxtmottagare
- BE1442 Visit blyxtmottagare
- BE1580 Visit väckarklocka
- BE1470 Visit pager
- BE1560 Visit armbandsmottagare

Tillbehör

- BE9026 Trampmatta

Visit babyvakt

Information om medicinteknisk utrustning

Tack för att du valt en produkt från Bellman & Symfon, ett världsledande företag inom varseblivning med huvudkontor i Göteborg. Läs denna information noga för att vara säker på att du förstår och får ut det mesta av din Bellman & Symfon-produkt. Hör av dig till din audionom om du vill veta mer om produktens funktioner och fördelar.

Om Visit babyvakt

Avsedd användning


Den här enheten är en del av Visitsystemet. Systemets syfte är att uppmärksamma döva och hörselskadade personer på viktiga signaler hemmet. Babyvakten aktiveras när babyn gråter eller rumsterar. Den signalerar då din Visitmottagare som börjar ljuda, blixtra eller vibrera, beroende vilken mottagare du har.

Avsedd användare

Visitsystemet är utvecklat för dig som har en mild till grav hörselskada eller är döv och som har behov av ljud, syn- eller känsel förstärkning i hemmet.

Så fungerar Visitsystemet

Visitsystemet består av en uppsättning trådlöst anslutna sändare och mottagare som är utplacerade i hemmet. När en sändare registrerar en aktivitet, signalerar den mottagaren som notifierar dig med ljud, blyxtljus eller vibrationer. För att kunna använda Visitsystemet behöver du ha minst en sändare och en mottagare.

 Visitsystemet återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte en hörselnedsättning eller dövhet som beror på organiska förhållanden.

Driftsförhållanden

Använd enheten i en torr miljö och inom de temperatur- och luftfuktighetsgränser som anges i denna information. Om enheten blir våt eller utsätts för fukt bör den inte längre betraktas som pålitlig och ska därför bytas ut.

Rengöring

Koppla ur eventuella kablar innan du rengör enheten. Använd en mjuk, luddfri trasa. Låt inte fukt komma in i öppningarna. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprej, lösningsmedel, alkohol, ammoniak, slipmedel eller tryckluft. Enheten kräver ingen sterilisering.


Service och support


Om produkten verkar skadad eller inte fungerar korrekt, följ instruktionerna i bruksanvisningen. Om enheten fortfarande inte fungerar som avsett, kontakta din audionom för information om service och garanti.


Viktig säkerhetsinformation


Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftsförhållanden. Behåll bruksanvisningen för framtida användning. Om du enbart installerar enheten ska du ge bruksanvisningen till personerna som bor i hushållet.

Varningar

 Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna kan medföra kroppsskada eller orsaka elektriska stötar, brand, skador på enheten eller annan egendom.

 Förvara alltid Visitmottagaren utom räckhåll för barn under 3 år.

 Observera att du kan missa larm och notifieringar om batterierna laddats ur.

 Använd eller förvara inte enheten nära värmekällor som öppna lågor, värmeelement, ugn eller andra värmeavgivande enheter.

Visit babyvakt

- ⚠ Använd endast den typ av strömadapter och batteri som anges i bruksanvisningen.
- ⚠ Skydda enheten mot stötar under förvaring och transport.
- ⚠ Enheten är endast avsedd för inomhusbruk och får inte utsättas för fukt.
- ⚠ Ta inte isär eller modifiera enheten, det finns risk för elstötar! Manipulering eller demontering av enheten upphäver garantin.

- ⚠ Försök inte att manipulera enheten på något sätt. Använd endast originaltillbehör från Bellman & Symfon. Annars finns en risk för elstötar!
- ⚠ Batterier är giftiga. De får inte sväljas! Förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur. Om batterierna sväljs, uppsök läkare omedelbart!
- ⚠ Enheten genererar, använder och kan utstråla radioenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation.

Information om produktsäkerhet

- ⓘ Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till skador på enheten och upphäva garantin.
- ⓘ Utsätt inte enhetens batterier för öppen eld eller direkt solljus.
- ⓘ Tappa inte enheten. Om den tappas på en hård yta kan enheten skadas.
- ⓘ Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- ⓘ Enheten får endast repareras hos ett auktoriserat servicecenter.
- ⓘ Skydda elkablar från eventuella skador som kan uppkomma.
- ⓘ Om en allvarlig händelse inträffar i anknötning till den här enheten, kontakta tillverkaren och relevant myndighet.
- ⓘ Om du stöter på andra problem med din enhet, kontakta inköpsstället, din lokala Bellman & Symfon-representant eller tillverkaren. Besök bellman.com för kontaktinformation.
- ⓘ Denna enhet får inte användas på flygplan annat än om tillåtelse ges av flygplanets besättning.

Överensstämmelse

Bellman & Symfon försäkrar härmed att denna produkt i Europa uppfyller de väsentliga kraven i förordningen om medicinteknisk utrustning, EU 2017/745 samt nedanstående direktiv och förordningar. Den fullständiga texten i försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfon eller lokal Bellman & Symfon-representant. Besök bellman.com för kontaktinformation.

2014/53/EU	Direktiv om radioutrustning (RED)
EU 2017/745	Förordning om medicinteknisk utrustning (MDR)
2014/35/EU	Direktiv om lågspänning (LVD)
2014/30/EU	Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2015/863/EU	Direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS)
EC1907/2006	REACH-förordningen

ISO-certifiering för tillverkare

Bellman är certifierade i överensstämmelse med SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 13485

SS-EN ISO 9001 certifieringsnummer: CN19/42071
SS-EN ISO 13485 certifieringsnummer: CN19/42070


Certifieringsorgan

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park
Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN
Storbritannien

Visit babyvakt

Sätta upp babyvakten

- 1 Dra bort batterifliken för att starta enheten.
(Du kan hålla nere båda testknapparna i 3 sekunder för att sätta på / stänga av den).
- 2 Ställ babyvakten på sängbordet eller sätt upp den på väggen med medföljande skruv och plugg.
Det rekommenderade avståndet är 0,5 – 2 m, utom räckhåll för barnet.

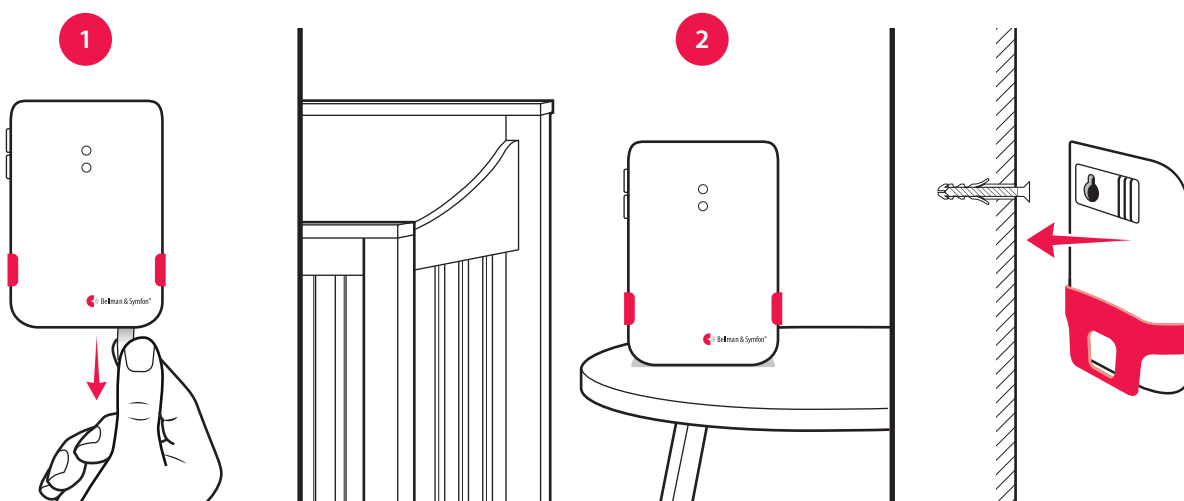

Testa anslutningen

Med testknapparna


- 1 Tryck samtidigt på babyvaktens testknappar.
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den skickar en radiosignal.
- 2 Den orangea Visittlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

i Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

Med hjälp av din röst

- 1 Ställ dig i närheten av babyvakten och för lite ljud.
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den aktiveras av ljudet och skickar en radiosignal.
- 2 Den orangea Visittlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

i Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

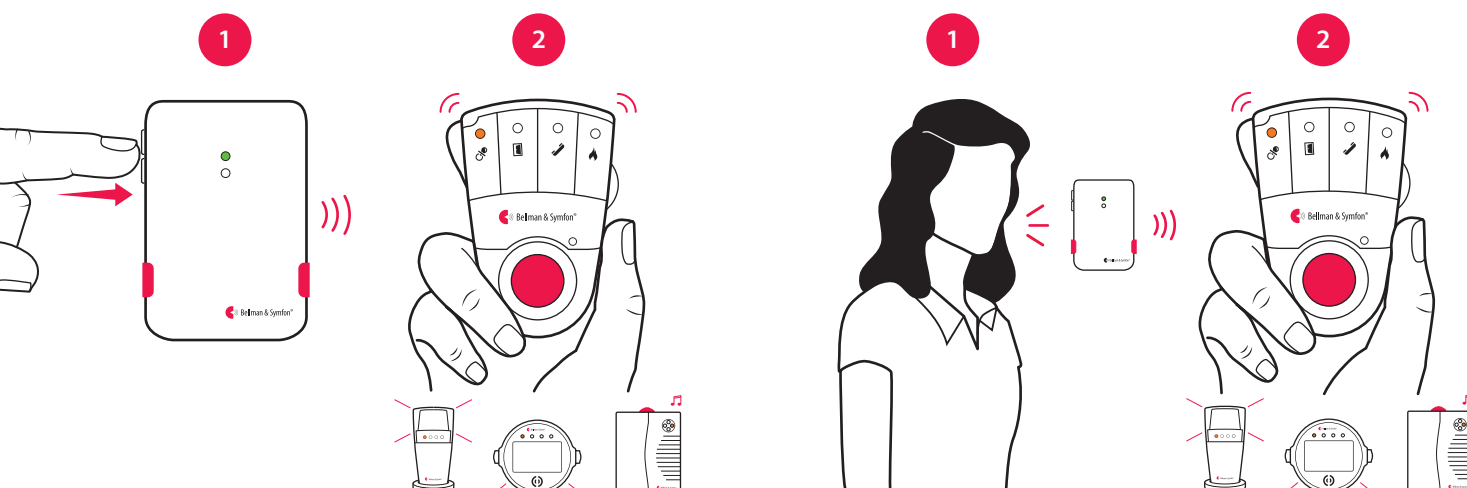


Visit babyvakt

Ändra inställning


Knapparna för känslighet och fördröjning sitter på babyvaktens vänstra sida. När du trycker på knappen visas först din nuvarande inställning. Tryck upprepade gånger på knappen för att ändra inställning.


- Om babyvakten inte aktiveras när barnet gråter – öka känsligheten.
- Om babyvakten aktiveras för lätt – minska känsligheten.
- Om babyvakten aktiveras för tidigt eller för sent – justera fördröjningen.

Inställningar, känslighet

	65 dB	Röd
	75 dB	Orange
	85 dB	Grön

Inställningar, fördröjning

	30 s	Röd
	10 s	Orange
	1 s	Grön

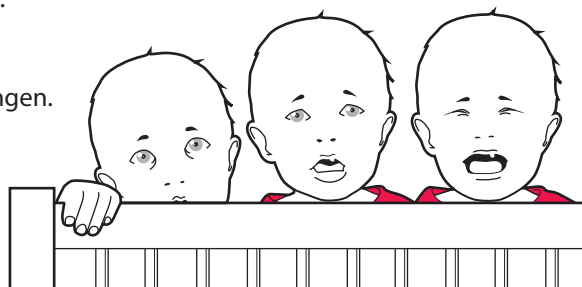



Förinställt signalmönster

När babyvakten aktiveras av barnets röst eller en ansluten trampmatta händer följande:

- 1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att babyvakten skickar en radiosignal till mottagaren.
- 2 Den orangea Visitlampan på mottagaren tänds och den börjar att ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Babyvakten och trampmattan styr signalmönstret och förinställningen är:

Babyvakt

Signalmönster, mottagare

Källa	Statuslampa	Visitlampa	Ljud	Vibration	Blixt
▪ Babyröst	Grön, övre	Fast orange ljus	Babymelodi	Snabb 	Ja
▪ Trampmatta	Grön, undre	Fast grönt ljus	1 × dörrklocka, mörk	Långsam 	Ja

Byta signalmönster

Om du har mer än ett barn kan du ställa in ett individuellt signalmönster för varje babyvakt. Öppna locket och flytta någon av signalomkopplarna uppåt (på). Var noga med att de andra signalomkopplarna är nere (av).



Babyvakt

Signalmönster, mottagare

Inställning	Källa	Visitlampa	Ljud	Vibration	Blixt
	Babyvakt 1	Fast orange ljus	Babymelodi	Snabb 	Ja
	Trampmatta 1	Fast grönt ljus	Babymelodi	Snabb 	Ja
	Babyvakt 2	2 × blinkar orange	Babymelodi	Snabb 	Ja
	Trampmatta 2	2 × blinkar grönt	Babymelodi	Snabb 	Ja
	Babyvakt 3	3 × blinkar orange	Babymelodi	Snabb 	Ja
	Trampmatta 3	3 × blinkar orange	Babymelodi	Snabb 	Ja
	Babyvakt 4	Blinkar orange	Babymelodi	Snabb 	Ja
	Trampmatta 4	Blinkar orange	Babymelodi	Snabb 	Ja


Visit babyvakt

Byta radionyckel

Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under babyvaktens lock.

Så här byter du radionyckel:

- 1 Ta försiktigt bort bordsstället från babyvakten och öppna locket. Flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta radionyckel.
- 2 Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på babyvaktens testknapp inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge. Notera att alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

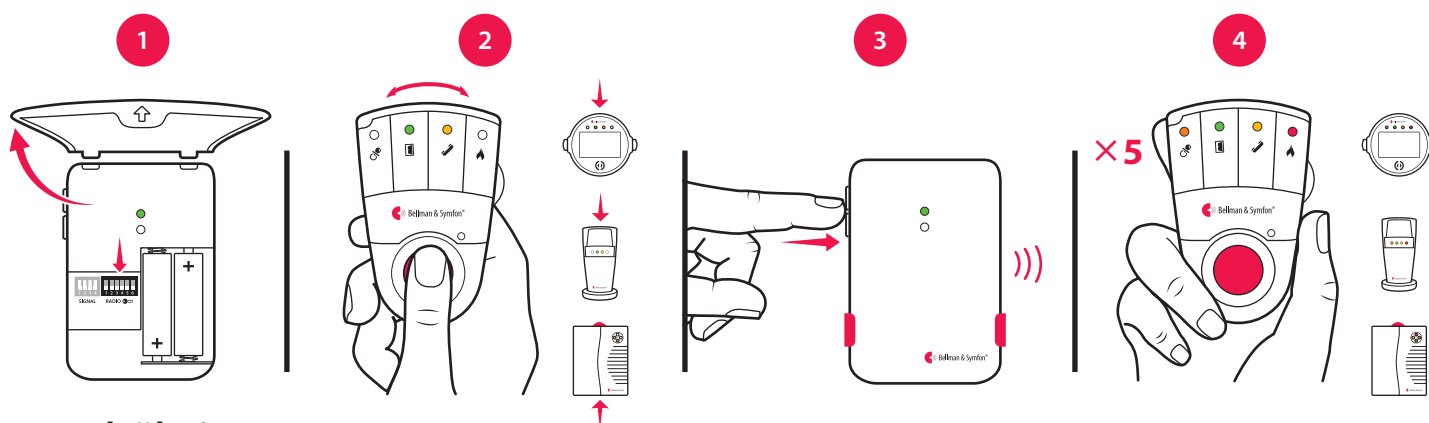



Felsökning


Om	Gör så här
Statuslampan blinkar orange	<ul style="list-style-type: none">▪ Byt batterier. Använd enbart 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.
Statuslampan tänds i grönt men mottagaren aktiveras inte	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollera sändarens och babyvaktens batterier och anslutningar.▪ Flytta mottagaren närmare babyvakten för att säkerställa att den är inom räckvidd.▪ Kontrollera att enheterna har samma radionyckel, se Byta radionyckel.
Statuslampan tänds inte trots att babyn gråter	<ul style="list-style-type: none">▪ Flytta babyvakten närmare barnet eller öka mikrofonens känslighet, se avsnittet Ändra inställningar.⚠ Se alltid till att babyvakten är utom räckhåll för barn.Placera aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhage.
Babyvakten aktiveras för lätt	<ul style="list-style-type: none">▪ Minska mikrofonens känslighet eller flytta babyvakten längre bort från spjäsängen, se Ändra inställningar.
Babyvakten aktiveras för snabbt	<ul style="list-style-type: none">▪ Öka fördröjningen, se Ändra inställningar.
Babyvakten aktiveras för sent	<ul style="list-style-type: none">▪ Minska fördröjningen, se Ändra inställningar.
Mottagaren aktiveras utan någon anledning	<ul style="list-style-type: none">▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se Byta radionyckel.


Visit babyvakt


Symbolförklaring


 Med den här symbolen bekräftar Bellman & Symfon att produkten uppfyller de väsentliga kraven i förordningen om medicinteknisk utrustning, EU 2017/745.

 Den här symbolen anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras. Symbolen finns på produkten och förpackningen.


 Den här symbolen anger tillverkarens katalognummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras. Symbolen finns på produkten och förpackningen.


 Den här symbolen anger tillverkaren av medicinteknisk utrustning, enligt EU-direktiven 90/385/EEC, 93/42/EEC och 98/79/EC.


 Den här symbolen indikerar att du bör läsa bruksanvisningen.

 Den här symbolen indikerar att det är viktigt att du uppmärksammar relevanta varningsmeddelanden.


 Den här symbolen indikerar viktig information för hantering och produktsäkerhet.


 Temperatur vid transport och förvaring: -10° till 50° C
Drifttemperatur: 0° till 35° C

 Luftfuktighet vid transport och förvaring: $<90\%$, ej kondenserande
Luftfuktighet vid drift: 15% till 90% , ej kondenserande

 Atmosfäriskt tryck vid drift, transport och förvaring: 700 till 1060 hpa

Driftsförhållanden Den här enheten är tillverkad så att den fungerar utan problem eller begränsningar om den används som avsett, såvida inte annat anges i bruksanvisningen eller detta häfte.

 Med CE-symbolen bekräftar Bellman & Symfon att produkten uppfyller EU:s standarder för hälsa, säkerhet och miljöskydd, samt RED-direktivet för radioutrustning 2014/53 / EU.

 Den här symbolen indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Lämna din gamla eller oanvända produkt på därtill avsedd samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning eller ta med den till din audionom för lämplig bortskaffning. Genom att se till att denna produkt bortskaffas på rätt sätt hjälper du till att förhindra skador på miljön och människors hälsa.



Tillverkare

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim, Sverige
Telefon: 031 68 28 20
E-post: info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1491_116MAN001-SE
Utgivningsdatum: 2020-05-05

TM och © 2020 Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.